

警 語

以下症狀及部位禁止使用本產品

- 1.以下人士：植入心臟起搏器或除顫器、患有心臟疾病、勞損性背痛、孕婦或分娩後不久、骨折、骨質疏鬆、關節病患者、患有惡性腫瘤、皮膚有創傷者或患有濕疹等禁止使用。
- 2.敏感區域：頭部、面部、頸椎、脊椎、關節、肌肉覆蓋較少的靠近骨骼的位置（如：脛骨、足背、手背等）、瘀青和疼痛部位，皆禁止使用本產品，若有身體不適者請於使用前諮詢醫生的意見。

注意事項

- 1.在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 2.本產品不用於醫療用途，僅提供個人和家庭按摩使用。
- 3.使用本產品前，請完全展開充電線，請勿與其他大功率電器共用同一電源。
- 4.清潔保養及移動產品時，務必將充電連接線拔下。
- 5.過度使用本產品會導致機體過熱和縮短產品壽命，重複使用時，須讓產品冷卻一段時間後再使用。
- 6.請勿站立或直接坐在本產品上，以免發生跌倒事故。
- 7.使用時請勿覆蓋機身，以免溫度過高導致故障，並禁止手指、頭髮或其他身體部位靠近震動頭軸心，以避免被夾住。請勿將產品暴露在高溫處或發熱設備的周圍，如火源、陽光直射處、微波爐。
- 8.請勿在浴室等潮濕環境下使用，請勿把產品浸入水中及其他液體，以避免引起短路或觸電。
- 9.請勿將任何物品放入產品的插孔中，並定期清除產品及充電器上的灰塵。
- 10.不使用時應先關閉電源開關，並拔掉充電線，請勿用濕手拔插充電器。

11. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
12. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
13. 產品禁止改裝，非專業人員請勿擅自打開機體及維修。
14. 需要擦拭本產品時，請待本機冷卻後，再使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
15. 產品顏色及外觀以實際出貨為主。
16. 僅提供標示於電器之超低安全電壓。

※充電時建議選用電流輸出為2A(含)以上之充電器，可降低本產品充電時間。避免無法充電，請勿選用電流輸出為0.5A以下之充電器。

正確電池回收方式	一在電器報廢前應取出電池 一應安全地丟棄電池。 一取出電池前電器應切斷電源
-----------------	---

設備名稱：筋膜槍 Equipment name		型號（型式）：FG-61 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
備考1，“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2，“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3，“—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。**

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橫二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

6 段 式 肌 肉 舒 緩 筋 膜 槍

FG-61




使用說明書


OPERATING INSTRUCTIONS

為了讓您在產品使用上更方便順利，請詳讀本產品使用說明書，以免發生使用不當的狀況。

產品說明

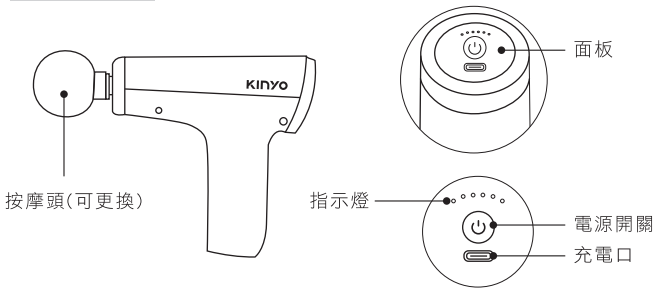

安裝方式

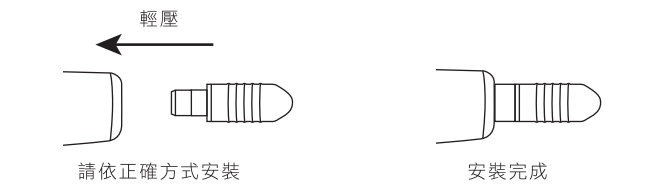

按摩頭說明

圓頭	錐頭	扁頭	Y型頭
適用於按摩各個肌肉部位，手、背部、臀腿部	適用於深層組織，如手掌、足底。	適用於各個肌肉部位的放鬆、塑形。	適用於按摩頸部、跟腱處。

產品規格

品名：筋膜槍	安全關機時間：15分鐘
型號：FG-61	產品尺寸：W150xH145xD55mm (不含按摩頭)
額定電壓：5V＝2A	材質：ABS塑膠
電池規格：2200mAh鋰電池	配件：按摩頭x 4、充電線
產品重量：449g±10g	

產品使用

開/關機

- 長按開關鍵約三秒開機
- 長按開關鍵約三秒關機

檔位調節

- 開機初始檔位為一檔
- 按壓一次則會增加一檔
- 最大檔位為六檔，當到達六檔時再點擊一次會回到一檔。

※注意：為了保護骨骼及肌群，請避免長時間定點按摩而造成損傷。

使用提醒

本產品採用改良升級版馬達，在不同檔位下，略微施力重壓可瞬間產生大於該檔位的震速，此功能設計用途為：提供使用者更多元的力道選擇，可根據個人適應度和需求做更細緻深層的力度調整。

充電方式

請使用本產品附的USB充電線充電

- 1.將充電線插入充電器(另購)並連接到家用電源。
- 2.將另一端Type-C充電線連接到產品主體的充電孔即可充電。
- 3.充電時指示燈藍燈閃爍，依電量顯示1-6格燈，充飽電藍燈全亮。
- 4.充電時間大約為5-6小時，充電完成後可使用6-7小時（使用時間依檔位不同而定）。

※為確保使用安全，充電時產品無法啟動。

清潔保養

- 1.請待本機冷卻後，再用中性清潔劑及軟布擦拭，禁止使用腐蝕性的清潔劑，如汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時確保任何液體不得進入本機內部。
- 2.長時間存放或旅行時，請將產品放在原包裝內保持乾燥。

故障處理

如果按照以下方法仍無法解決，請諮詢購買的銷售店家或到指定的售後維修點進行維修。

故障處理	處理方法
筋膜槍不運作	· 檢查電源插頭/USB插頭/主體充電孔是否插牢，請確實插牢。 · 檢查電源插座是否有電。 · 檢查開關是否打開，請確實開啟開關。
筋膜槍突然停止運作	· 為確保使用安全，產品持續使用約15分鐘，會自動關機。 · 再按一次按鍵即可開機，但請勿長時間按摩同一部位。 · 當機身發熱時，請先冷卻一段時間後再使用。
使用時按摩頭脫落	· 開機前請先確認按摩頭有安裝確實，插入筋膜槍前方的圓孔底部。

※緊急注意事項

使用中如有冒煙、異味、起火燃燒的狀況，請立即停止使用本產品，並請立即與本公司客服聯繫。