

感謝您選購 KINYO 健康沖牙機

傳統口腔護理：傳統的刷牙方式不能輕易地去除隱藏的食物殘渣和有害細菌，牙線只能抵達牙齦下方有限的區域。


KINYO 健康沖牙機能有效清除食物殘渣和有害細菌。

KINYO

攜帶型高效沖牙機


說明書

IR-1009

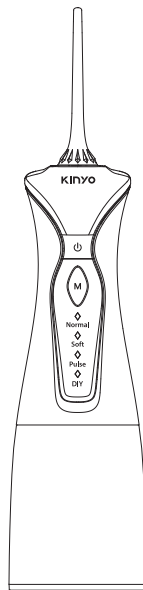


Portable Oral Irrigator

產品描述

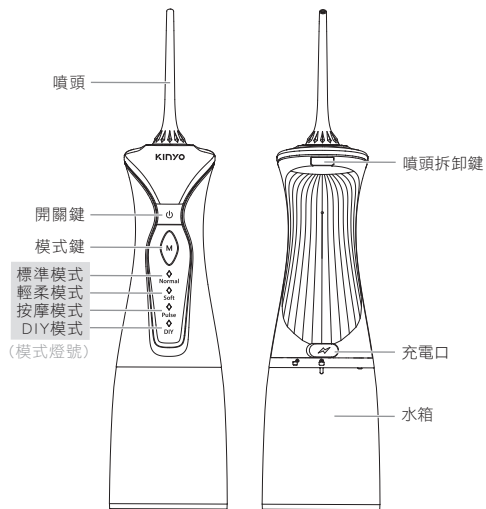

產品配件

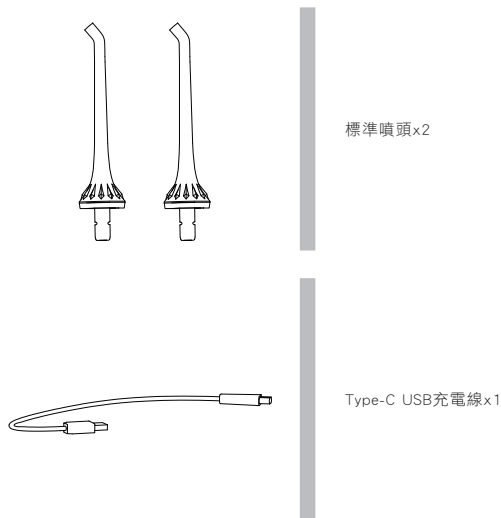


啟動工作

- 非常重要！第一次使用前，請將設備充滿電；
充電時間大約4-5小時。
- 充電時，請勿使用產品。


安裝噴頭

將噴頭插入主機上方孔位位置，當發出「喀噠」聲，即安裝成功。

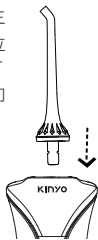


卸載噴頭

如需更換噴頭，請按住噴頭拆卸鍵，然後將噴頭取出。

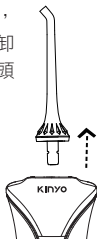

水箱加水

- 將水箱順時針方向旋轉後往下拉，往進水口注水。
- ※不可超過最高水位線(300ml)。
- ※請確保注水時設備是關閉狀態。

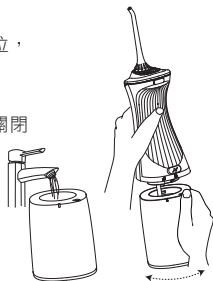

啟動設備與選擇模式

開/關機

長按【開關鍵】進入工作狀態，再次短按關機。

※提醒：請先將噴頭放入口腔中，對準牙齒後，再按【開關鍵】啟動設備。


切換模式

短按【模式鍵】進行4檔模式切換循環：(燈號說明如圖示)

Normal標準→Soft輕柔→Pulse按摩→DIY水壓強弱

方法一：先按【開關鍵】後，再按【模式鍵】選擇模式。

方法二：先按【模式鍵】選擇模式後，再按【開關鍵】啟動設備。

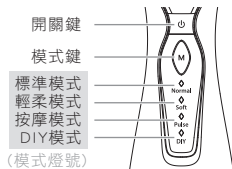


特殊功能：自訂水壓強弱


- 在DIY模式下，長按3秒【模式鍵】可進入調節水壓強度模式、短按【模式鍵】可增加一檔水壓，共8檔，同時DIY的燈號會閃爍指示。
- 調節水壓強度模式下，5秒內不操作即鎖定並退出調節模式，下次使用時即可於模式切換時快速使用。

推薦技巧

1. 向下傾斜將噴頭放置嘴裡，將噴頭對準牙齒後開啟設備。
2. 噴射水流同牙床成90度角，微閉嘴唇，以免水流側射。

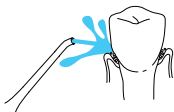

3. 為達到最佳效果，請先從臼齒部位(後牙)開始，朝著門牙方向開始清洗。使噴射頭沿著牙床線滑動清理，並在齒間做短暫停留。直到牙齦周圍及牙齒之間都清理乾淨。

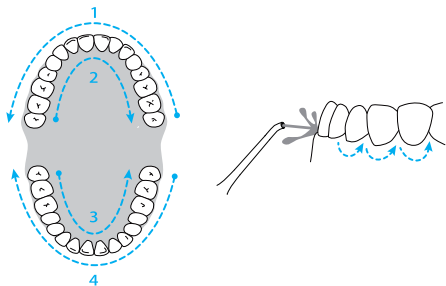

拆裝示例


使用完畢

關閉電源設備，打開水箱，倒出水箱中殘餘液體，最後再將水箱裝回機身。

拆卸水箱

一手抓住產品機身，一手向下拉動並旋轉水箱，即可拆下水箱。

※拆卸後可用常溫清水清潔水箱，請勿使用清潔劑。使用後再將水箱裝回機身。

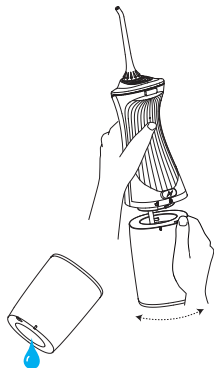

電源供應

- 為了最大化電池的使用壽命，請在電量不足時，立即接上電源充電。
- 長期不使用的話，建議2-3個月充電一次。
- 請勿邊充電邊使用

注意事項與警語

- 使用前請確實遵從說明書內使用方式及注意事項與警語。
- 剛做過口腔手術、牙周手術或者正在治療牙齒的人，在使用本產品前請先諮詢醫生。
- 請勿將噴頭對準眼睛、耳朵和喉嚨，不要將產品用在清洗口腔外的地方。
- 如果舌頭有外傷，請勿使用。
- 當使用本產品感到口腔異常時，請立即停止使用。
- 請勿自行拆解本機，否則可能引起安全事故。
- 若有故障現象發生，請盡速拔除此裝置，並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 請勿在水箱注入清水外的液體或化學劑(例如：漱口水)。
- 為防止燙傷，請勿注入溫度40度以上的清水。
- 若對此產品感到有問題，請諮詢牙科醫師再繼續使用。
- 請先將噴頭放入口中再開電源；使用後，請先關閉電源再從口中取出，避免水飛濺。
- 請避免長時間噴同一部位，以免可能導致牙齒或牙齦受傷。
- 為確保個人衛生，請勿與別人共用噴頭。
- 使用本產品前要檢查是否有明顯的損壞，如有損壞或者機器嚴重摔落請勿使用。
- 請將本產品置於兒童無法觸及的位置，且兒童應在相應指導監督之下使用，避免兒童擅自使用本產品，以免導致意外。
- 請勿踩踏、重摔或者對本產品施加強烈撞擊，以免對產品造成損壞或導致意外。

- 請勿將本產品用於沖牙以外的用途，以免對產品造成損壞或導致意外。
- 本產品含有內置充電電池，請勿將其投入火中加熱或者在高溫處充電、使用或放置。
- 本產品因涉及個人衛生健康，除商品本身固有之瑕疵品外，一經拆封，恕不接受退貨。
- 配件屬消耗性零件，如噴頭等，恕不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

產品規格

額定電壓：DC 3.7 V

消耗功率：5W

使用電源：DC 5V 1A

電池規格：內建鋰電池1500mAh

充電時間：約4-5小時

防水等級：IPX7

水箱容量：300ml

出水時間：約15秒

出水壓力：20-120psi

脈衝水柱：1235-1265次/分(依不同水壓/模式而異)

產品重量：約296g(±3g)

產品尺寸：W84xH221xD72mm(含噴頭)

充電線長：80cm

配件：標準噴頭x2、充電線x1

※請務必使用通過BSMI認證的5V 1A充電器(需另購)

電源供應與充電說明

狀態	燈號顯示
電量顯示	長按模式鍵，白燈亮的數量表示當前剩餘電量
低電量提醒	四個白燈同時閃爍時，表示設備需及時充電
充電中	相應電量的白燈遞增閃爍
充電完成	四個白燈恆亮，表示產品已充滿電

常見問題和解決方案

問題	原因	處理方法
無法啟動產品	新購買 或三個月以上未使用 使電量過低	請先將產品充飽電 建議充電至少4~5小時 若仍無法充電或啟動 請聯繫經銷商
噴頭與旋鈕間 發生漏水	噴頭未安裝到位	將噴頭裝入到位
	噴頭固定座內的 密封圈損壞	請聯繫經銷商
水箱漏水	密封圈損壞	請聯繫經銷商
水壓不夠	電量過低	請先充飽電後再使用
產品不出水	過濾網堵塞	請聯繫經銷商
充電時 指示燈不亮	充電線沒有插到位 導致不過電	請先將充電線拔出後 重新插入到位
	電路故障	請聯繫經銷商

※如果按照以上方法還不能解決，請諮詢購買的銷售店到指定的售後維修點進行維修。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名		
地址		
購買日期	電話	
經銷商		

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040088
新竹/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5152309
台中/台中市東區東英十三街13號
電話:04-22119966
台南/台南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄/高雄市鼓山區文信路333號10樓8樓
電話:07-5547258

消費者服務專線: 03-5396627