

感謝您選購 KINYO 健康沖牙機

傳統口腔護理：傳統的刷牙方式不能輕易地去除隱藏的食物殘渣和有害細菌，牙線只能抵達牙齦下方有限的區域。


KINYO 健康沖牙機能有效清除食物殘渣和有害細菌。

KINYO


極淨・高效電動沖牙機

說明書

IR-2006

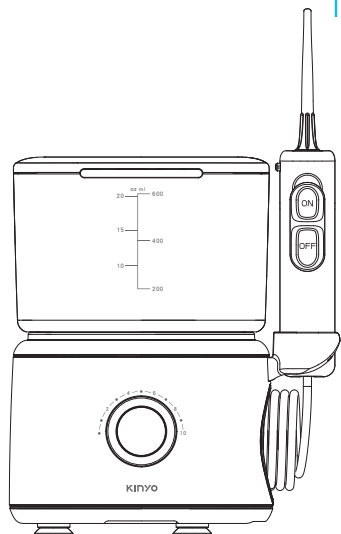

Portable Oral Irrigator

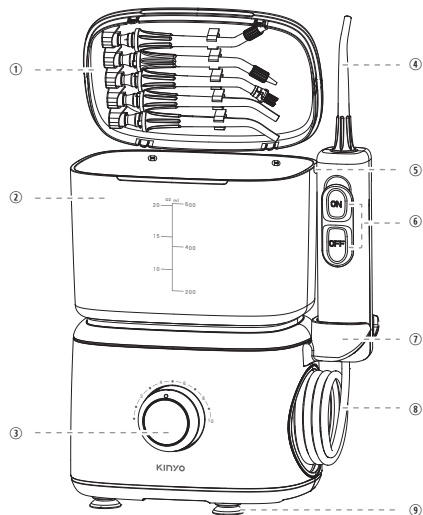

- ①水箱蓋(噴頭收納盒)
②水箱
③開關旋鈕/模式按鈕

- ④噴頭
⑤噴頭釋放按鈕
⑥手柄開關

- ⑦手柄支架
⑧水管
⑨底部吸盤



標準噴頭X2



牙套專用噴頭X1



牙齦按摩噴頭X1



深層清潔噴頭X1

使用說明

準備水箱

從底座上取下水箱和水箱蓋，在水箱中注滿水，注意水位不要超過水箱的最大容量刻度。將水箱重新放倒底座上，並稍微用力按壓。

※機身底部設有排水孔，用於水箱排水和機身內部排水，並非水箱漏水。




安裝噴頭

將噴頭插入旋鈕中間孔位，當發出清脆「咔嚓」聲，即安裝成功。




卸載噴頭

更換或取下噴頭時，請按住【噴頭釋放按鍵】，然後將噴頭取出。

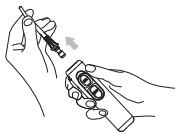



接電

確認產品和手是乾燥的情況下，把電源插頭插入插座中。

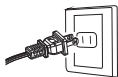

開關與水壓調節

- 通電狀態下，按【開關旋鈕】即可使用；旋轉可調節水壓強度：順時針方向旋轉，水壓由小變大。
※建議初次使用選擇最低水壓，待適應後再根據舒適度增大水壓。
- 再次按下【模式鍵】切換標準/按摩模式，可選擇自己適合的沖牙模式。
- 不拔除電源的狀態下，模式及水壓有記憶功能。
- 若開機超過3分鐘，機器會自動關機。下次使用請重新按壓開關旋鈕開機。

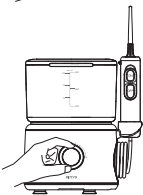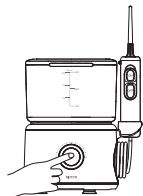

使用說明

沖牙


溫馨提示：首次使用沖牙器時，請從最低檔開始，待口腔適應後，再逐漸調大水壓；使用時可能會出現刺癢或輕微牙齦出血情況，這屬於正常現象，一般會在1-2週內停止。

俯身於盥洗池上方，將噴頭放入口內對準牙齒，緊閉嘴唇防止水流飛濺，但要讓水流從嘴角流到盥洗池；一隻手打開手柄開關，另一隻手旋轉開關旋鈕並調整水壓。轉動噴頭旋鈕可控制水流方向、推動手柄開關可使水流暫停。



清洗(沖牙完畢)

使用完畢請關閉電源設備，清洗前請務必將插頭從電源插座中拔出；接著打開水箱，倒出水箱中殘餘液體，最後再將水箱裝回機身。

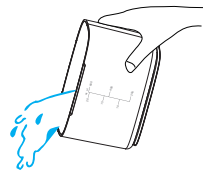

保養維護

每次使用完沖牙器後，請務必拔掉電源插頭，並將水箱倒置在平面上，待水完全乾後，和擦拭乾淨的主機一起放置在陰涼乾燥的地方。長期不使用時，應放置在收納箱內。


標準噴頭

360度全面沖洗口腔深處，彌補了牙刷難清潔部份，清潔深藏在牙縫和牙齦下的食物殘渣和有害細菌，給您的口腔帶來與時俱進的舒適體驗。比牙線更有效，對牙齦更健康。




牙套專用噴頭

針對牙套和其它牙科用具周圍難以觸及的部位，進行擦拭和沖洗。使用刷頭清潔牙套和其他牙科用具，水流將帶走沖洗出的殘屑。

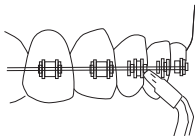


牙齦按摩噴頭

牙齦按摩噴頭可以將水注入牙床線下方的特定部位。以軟刷頭抵到牙齒上並與之成45度角，接著輕輕將刷頭放到牙床線下方的牙槽中。打開設備將壓力設置調至最低，將刷頭輕輕地放在牙縫上，然後順著牙床線方向進行清洗。

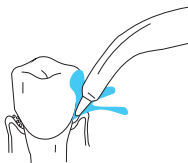


深層清潔噴頭

將水流以90度的方向對準牙齦，輕閉嘴防止水流飛濺，噴頭需靠近牙齒，讓刷毛能夠輕輕碰到牙齒為佳。首先從臼齒(牙齒背面)開始，逐步向牙齒前面沖洗。讓噴頭沿牙齦輕輕移動，在兩個牙齒之間需要稍為作短暫停留、洗刷牙齒，以讓水流能夠在牙齒之間通過。在牙齒的各個側面重複同樣的操作，直至所有牙齒之間、牙齒的前面、後面、上部和底部都清洗乾淨。

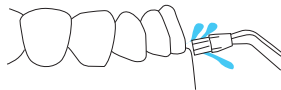


推薦技巧

1. 向下傾斜將噴頭放置嘴裡，將噴頭對準牙齒後開啟設備。
2. 噴射水流同牙床成90度角，微閉嘴唇，以免水流側射。

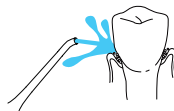

3. 為達到最佳效果，請先從臼齒部位(後牙)開始，朝著門牙方向開始清洗。使噴射頭沿著牙床線滑動清理，並在齒間做短暫停留。直到牙齦周圍及牙齒之間都清理乾淨。

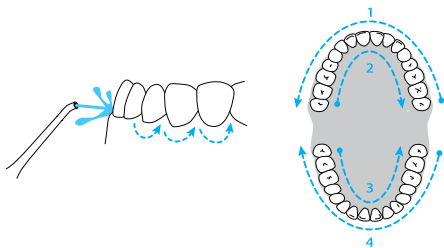

注意事項與警語

- 使用前請確實遵從說明書內使用方式及注意事項與警語。
- 剛做過口腔手術、牙周手術或者正在治療牙齒的人，在使用本產品前請先諮詢醫生。
- 請勿將噴頭對準眼睛、耳朵和喉嚨，不要將產品用在清洗口腔外的地方。
- 如果舌頭有外傷，請勿使用。
- 當使用本產品感到口腔異常時，請立即停止使用。
- 請勿自行拆解本機，否則可能引起安全事故。
- 若有故障現象發生，請盡速拔除此裝置，並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 請勿在水箱注入清水外的液體或化學劑(例如：漱口水)。
- 為防止燙傷，請勿注入溫度40度以上的清水。
- 若對此產品感到有問題，請諮詢牙科醫師再繼續使用。
- 請先將噴頭放入口中再開電源；使用後，請先關閉電源再從口中取出，避免水飛濺。
- 請避免長時間噴同一部位，以免可能導致牙齒或牙齦受傷。
- 為確保個人衛生，請勿與別人共用噴頭。

- 請將本產品置於兒童無法觸及的位置，且兒童應在相應指導監督之下使用，避免兒童擅自使用本產品，以免導致意外。
- 請勿踩踏、重摔或者對本產品施加強烈撞擊，以免對產品造成損壞或導致意外。
- 請勿將本產品用於沖牙以外的用途，以免對產品造成損壞或導致意外。
- 本產品因涉及個人衛生健康，除商品本身固有之瑕疵品外，一經拆封，恕不接受退貨。
- 配件屬消耗性零件，如噴頭等，恕不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

產品規格

- 額定電壓：AC 100-240V
- 額定電流：50/60Hz
- 消耗功率：24W
- 防水等級：IPX4
- 水箱容量：600ml
- 出水壓力：25-130psi
- 脈衝水柱：1000-1500次/分（依不同水壓/模式而異）
- 產品重量：約500g
- 產品尺寸：W162xH189xD103mm
- 噴頭尺寸：98x20mm
- 包裝尺寸：W180xH198xD120mm
- 沖牙機線長：1.3m
- 產品材質：ABS塑膠
- 配 件：標準噴頭X2、深層清潔噴頭x1
牙套專用噴頭x1、牙齦按摩噴頭x1

問題	原因	處理方法
噴頭與噴頭旋鈕之間漏水	噴頭未安裝到位	取下噴頭重新安裝吻合
沖牙器的底座同手柄相連的軟管發生漏水	管子損壞	聯繫銷售商
壓力不夠	水箱安裝位置不當	重新安裝水箱，然後用力下壓
設備無法啟動	馬達不運轉	確認是否有電源輸入；聯繫銷售商
產品不出水	密封圈破損	聯繫銷售商

※如果按照以上方法還不能解決，請諮詢購買的銷售店或到指定的售後維修點進行維修。

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名		
地址		
購買日期	電話	
搭配灰底區塊經銷商	(蓋章有效)	

耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北區/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹區/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中區/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南區/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄區/高雄市鼓山區文信路333號10樓8樓
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627