

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司全台服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

KINYO

NDS-230

體重計

使用說明書

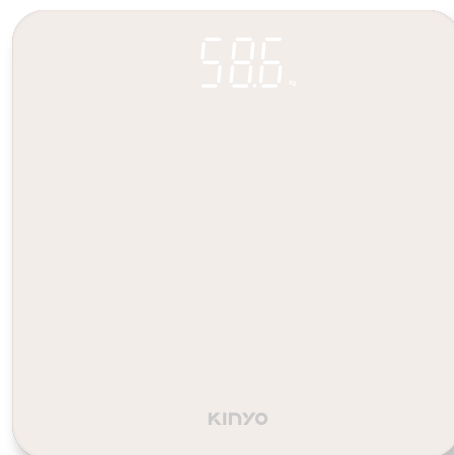

使用說明書
OPERATING INSTRUCTIONS

為了讓您在產品使用上更方便順利，請詳讀本產品使用說明書，以免發生使用不當的狀況。

功能介紹

	測量單位	兩種單位選擇:kg(公斤)、lb(磅)。
	自動開機	雙腳直接站於秤台上，螢幕自動顯示開機畫面。
	自動關機	當測量完畢，螢幕會在10秒後數字消失自動關機。
	超重顯示	當測量體重超過180kg，呈現此螢幕即表示過載。
	低電量顯示	當顯示此螢幕時，表示需更換電池。

使用方式

- 將體重計放置於平坦堅硬的地面，避免放置於地毯、柔軟或不平坦的表面。
- 首次使用請先進行校正
輕踏秤面，待螢幕出現數值後立即移開腳部，靜待螢幕歸零至「0.0KG」，再重新站上秤重，以確保數值準確。
- 直接將雙腳站於體重計秤台的中央，直到數字顯示穩定，即是您目前的體重。
- 雙腳離開秤台後，約10秒後體重計將自動關閉。

* 5kg以上自動感應開機。

* 5kg以上自動感應開機。

* 5Kg以下小物品秤重請先輕壓秤面，手動開機點亮螢幕，待數據歸零至0.0，即可對5Kg以下小物品進行秤重，小物品可秤重範圍在500g至5kg之間。

產品規格

額 定 電 壓	DC 3V
使 用 電 池	4號(AAA)電池×2
材 質	ABS塑膠/鋼化玻璃
最 大 秤 重	180 kg/396 lb
最 小 感 度	500g
最 小 單 位	0.1kg
精 確 誤 差 值	50kg±0.3kg:100kg±0.4kg:150kg±0.5kg
測 量 單 位	Kg/lb
液晶螢幕尺寸	75×30mm
產 品 尺 寸	W260×D260×H21mm
產 品 重 量	0.84Kg

注意事項或警語

- 避免使用化學溶劑擦拭，以免破壞機殼光澤與結構。必要時可使用沾水溼布擦拭。
- 請勿使用水柱或大量的水及液體直接清洗，以免造成機件故障。
- 體重計表面請保持乾燥，避免有水時測量會不慎滑倒。
- 避免擺放在浴室等濕氣重的地方，以免造成生鏽、絕緣不良的情況。
- 避免將體重計置放在過熱或過冷的地方，以維持正常的測量功能。
- 本產品嚴禁重摔、撞擊、或沖擊。
- 請勿自行分解修理或改裝。
- 長期不使用時，請將電池取出。
- 體重計應放置平坦的地面使用。不同地面處測量的體重可能會有誤差。
- 產品外觀、顏色，依實際出貨為主。

